

EuroMed

Votre matériel médical en toute confiance

SENSIBILISATION CONTENTIONS



✓ **Fermeture contentions**

Contentions au Lit

✓ **Ceintures au lit**

✓ **Attache-poignets**

✓ **Attache-chevilles**

Contentions au Fauteuil

✓ **Ceintures au fauteuil**

✓ **Plastrons au fauteuil**



+33 3 27 64 34 99



info@euromed-materiel-medical.com



117 rue de Maubeuge
59620 Aulnoye Aymeries



ATTENTION

NE PAS UTILISER les contentions si vous ne respectez pas TOUS ces points :



Une mauvaise utilisation des systèmes de maintien peut provoquer des blessures graves et entraîner la mort par étranglement ou asphyxie abdominale. (**Sangle périnéale** entre les jambes obligatoires)



Surveiller constamment les patients équipés par contentions et **réévaluer** la contention. (réévaluation de la contention toutes les **24h**)




Maintenir, si besoin, les deux barrières latérales du lit levées en fonction de la prescription. (**barrières** = prescription différente du système de contention)



Avoir toujours sous la main un **élément tranchant** rapide et sûr à utiliser en cas d'urgence.

- Utiliser toujours le produit dont la taille correspond au patient.
- Vérifier TOUT le système AVANT de l'utiliser.
- Fixer solidement TOUTES les bandes au châssis du lit.
- Appliquer toujours les 2 bandes latérales de la ceinture abdominale ainsi que la sangle périnéale.
- Suivre les instructions du protocole de maintien de votre établissement.
- NE PAS UTILISER les contentions si vous n'avez pas reçu la formation et l'entraînement nécessaires.
- Chez les patients qui ont un pacemaker, ne pas approcher la clé à moins de 15cm.
- Toujours respecter la prescription médicale. Prescription obligatoire dans l'heure suivant la mise en place du système de contention

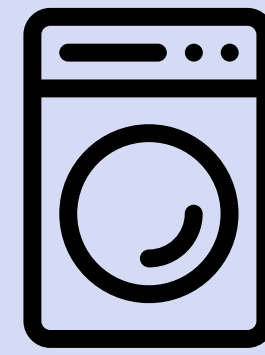

Entretien

- Les produits Salvafix sont :
 - **ignifugés**, ils ne prennent pas feu mais peuvent se consumer
 - 100% polyester, donc **ne rétrécissent** pas aux lavages
 - **lavables à 90 °C**
 - compatibles aux tunnels de séchage à 110°C
 - **résistent à l'eau de javel**
 - Avant de laver/sécher les produits Salvafix retirez les bouchons de fermeture et les tiges.
 - Nettoyer régulièrement la partie crochet de la fermeture Velcro avec une brosse dure pour éliminer les peluches et les fils.
- Les systèmes de fermeture :
 - Désinfection par solution **Antiseptique**
( pas d'immersion)



FERMETURE des contentions

- Ne pas mélanger Tiges et Bouchons des systèmes de fermeture des différentes marques
- Pictogramme pour repérer les marques (Pictogramme Salvafix )

Fermeture Magnétique :



Waterproof

Système sans mousse qui permet d'immerger la fermeture pour la désinfection. Résiste à une traction allant jusqu'à 300kg. Elle est composée d'un bouchon de sécurité orange et d'une tige à base plate.



Standard

Résiste à une traction allant jusqu'à 150kg. Elle est composée d'un bouchon de sécurité jaune et d'une tige à base plate.



Renforcée

Elle résiste à une traction allant jusqu'à 300kg. Elle est composée d'un bouchon de sécurité jaune, renforcé par une base en aluminium et d'une tige à base plate.



Clé Magnétique

La clé magnétique, de forme conique pour une meilleure prise en main, possède un anneau à la base ce qui facilite le positionnement sur le bouchon et évite qu'elle ne glisse. Possède un aimant néodyme, jusqu'à 6 fois plus puissant qu'un aimant de ferrite et plus durable car il ne perd pas de particule.

Fermeture Mécanique:



Alu Etanche


Elle peut être immergée pour un maximum d'hygiène. Elle résiste à une traction allant jusqu'à 600kg. Elle est composée d'un bouchon et d'une tige à base plate, le tout est 100% Aluminium.



Clé Plate

En acier inoxydable, a été spécialement conçue pour ouvrir rapidement la Fermeture Alu Etanche.



Fonctionnement du système de Fermeture

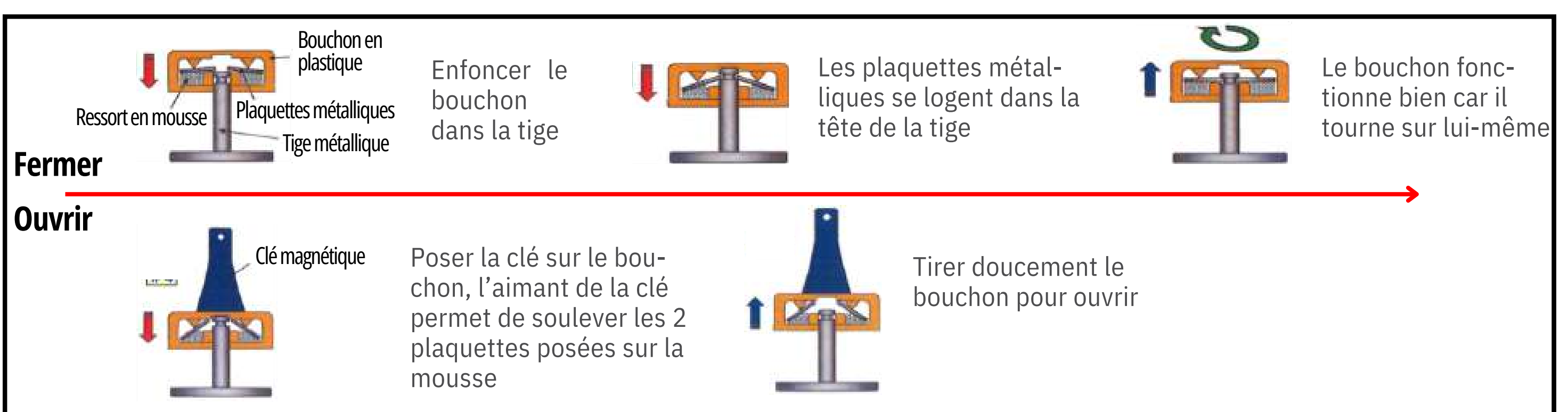



Contentions au lit

- Attache en **5 points** pour un maximum de **Sécurité** (2 poignets, 2 chevilles, abdominale), plus on retire des points de contention plus on augmente le risque d'accident (bascule du lit, glissements, étranglement...)
- Code **Alphanumérique** pour tracer le contentionnement du patient.
- Différentes tailles selon la morphologie du patient (toujours utiliser la taille correspondante)
- Etiquette d'identification de la contention et QR code de notice d'utilisation
- Non recommandé avec un matelas à air

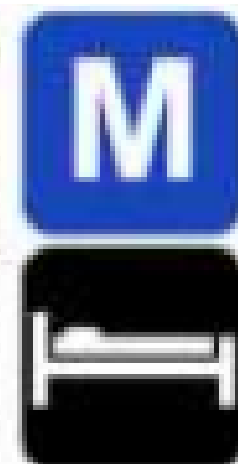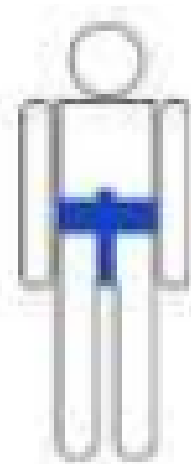

Ceintures au lit

- Taille principalement utilisé M et L, existe en S mais correspond plus à l'anorexie et XL pour le bariatrique
- Obligation d'avoir une **sangle périnéale** entre les jambes pour éviter le glissement et le risque d'asphyxie.
- Se fixe sur une **partie fixe** du lit (**cadre du lit**), où la contention ne peut ni monter ni descendre et où le cadre du lit peut continuer à monter.
- La ceinture doit être **centrée** et **plaquée** contre le matelas
- Les **sangles de sécurité** doivent obligatoirement être fixées, l'œillet de fixation de la sangle de sécurité permet de contrôler et déterminer la latéralisation, les sangles de sécurité pouvant aussi être utilisées pour maintenir la **position latérale de sécurité**

Ceinture Périnéale



Périnéale	Taille	Tour de taille
3001P	S	46 - 76 cm
3000P	M	68 - 108 cm
3002P	L	95 - 135 cm
3003P	XL	115 - 150 cm


- La partie inférieure, munie de brides, se fixe au cadre de lit ou au brancard ; la partie supérieure se place autour de la taille du patient.
- Les bandes latérales, cousues à la ceinture (sauf taille XL), permettent de contrôler et de déterminer la latéralisation du patient d'un ou des deux côtés en même temps.
- Les repères alphanumériques permettent de mémoriser l'emplacement des fermetures pour chaque patient et ainsi facilitent la mise en place à chaque application.

Composition Ceinture Périnéale :


- **1** ceinture de Haut. 18 cm (16 cm taille S)
- **2** bandes latérales cousues
- **1** sangle périnéale cousue
- **3** fermetures (S,M) / **4** fermetures (L,XL)
- **1** clé

Utilisation :

- Déplier la ceinture, la positionner en veillant à ce qu'elle soit plaquée et centrée sur le matelas ; les petits passants en direction des pieds du lit **2**
- Venir fixer fermement la ceinture à l'aide des 2 brides extérieures sur les parties rigides du cadre du lit en ayant au préalable positionné une tige de chaque côté dans les œillets prévus à cet effet (dans les lits articulés privilégier les parties mobiles) **1**
- Fermer sur la taille du patient en ajustant (laisser seulement le passage d'une main sur l'abdomen) **3**
- Toujours fixer les sangles latérales de sécurité sur les tiges extérieures, verrouiller à l'aide des bouchons **4**
- Toujours positionner la sangle périnéale sur la fermeture de la ceinture **5**

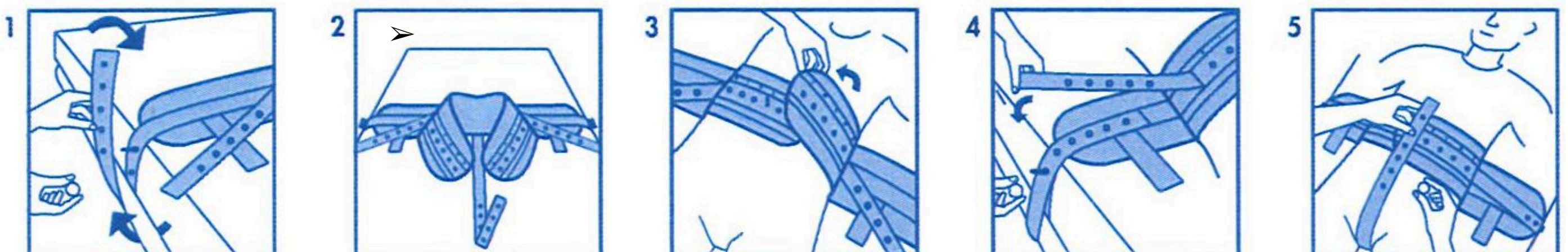

Présentation Vidéo :

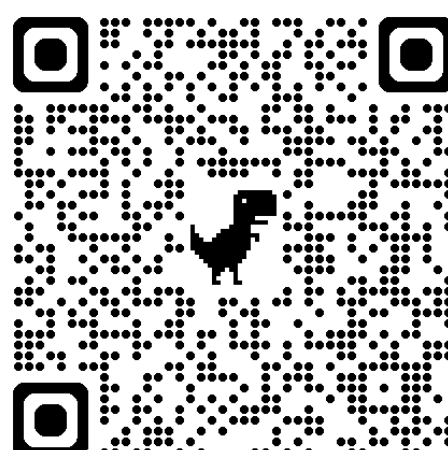

Ceinture Basic au lit



Code	Taille	Tour de taille
3050P	M	68 - 108 cm

- S'utilise pour les mêmes indications que la ceinture périnéale mais pour une patientèle spécifique : **patients de petite taille, dénutris, avec les hanches peu marquées ou les femmes à forte poitrine.**

- Limite la sensation d'inconfort liée à la largeur de la Ceinture périnéale sur ces patients

- Les bandes latérales, cousues à la ceinture, permettent de contrôler et de déterminer la latéralisation du patient d'un ou des deux côtés en même temps.


- La sangle périnéale cousue à l'arrière de la ceinture se fixe sur la partie supérieure de la ceinture en passant entre les jambes du patient. Elle lui évite ainsi de glisser vers le bas et de remonter vers le thorax

Composition :

- 1 ceinture de Hauteur 8 cm
- 2 bandes latérales cousues
- 1 sangle périnéale cousue
- 3 fermetures
- 1 clé

Utilisation :

- Déplier la ceinture et la positionner à plat sur le matelas **1**
- Venir fixer fermement la ceinture à l'aide des 2 brides extérieures sur les parties rigides du cadre du lit en ayant au préalable positionné une tige de chaque côté dans les œillets prévus à cet effet (dans les lits articulés privilégier les parties mobiles) **1**
- Fermer sur la taille du patient en ajustant (laisser seulement le passage d'une main sur l'abdomen) **2**
- Fixer les sangles latérales de sécurités sur les tiges extérieures, verrouiller à l'aide des bouchons **3**
- Venir positionner la sangle périnéale sur la fermeture de la ceinture **4**

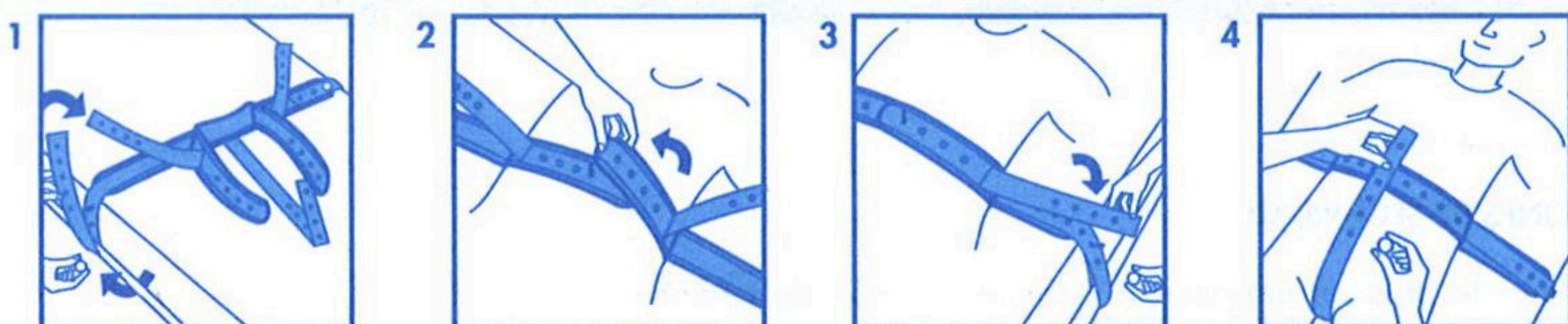

Ceinture Périnéale avec poignets intégrés



Avec poignets	Taille	Tour de taille
3000W	M	68 - 108 cm
3002W	L	95 - 135 cm

- La Ceinture périnéale avec attache-poignets intégrées a, comme son nom l'indique, les poignets cousus à la ceinture.
- La mise sous contention du patient est rapide grâce à un seul point de fixation de chaque côté du support. Idéale lorsque l'on ne pré-équipe pas.
- L'utilisation de fermetures étant moindre, moins de risque de perdre le matériel

Composition Ceinture périnéale avec Attache-poignets intégrées :

- 1 ceinture de Haut.18 cm avec attache-poignets M/L cousues
- 2 bandes latérales cousues
- 1 sangle périnéale
- 5 fermetures
- 1 clé

Attache-poignets



- Conçus en matières matelassées, épaisses et enveloppantes, pour éviter toute blessure par pression et frottement.
- Un velcro de pré-positionnement facilite son application et augmente la sécurité du système
- Repères alphanumériques pour mémoriser l'emplacement des fermetures pour chaque patient et ainsi faciliter la mise en place à chaque application (sauf taille M/L)
- La bride de fixation permet de pré-équiper les différents supports
- Peut être associé à la ceinture périnéale qui, munie de passants, permet de maintenir les bras le long du corps

Périnéale	Taille	Tour de Poignet
3251	S	09- 15cm
3250	M	14- 20 cm
3260	M/L	14- 25 cm
3252	L	19- 25 cm
3253	XL	24- 30 cm





Composition Attache-poignets :

- 1 attache-poignets avec bride cousue
- 4 fermetures
- 1 clé


7

Utilisation Taille M:

- Fixer l'attache-poignets, grâce à la sangle, au cadre du lit, sur la partie rigide, en ayant au préalable passé la tige dans l'œillet prévu à cet effet. Pour une amplitude de mouvement limité, passer la sangle dans la pate de la ceinture 1
- Fermer celle-ci à l'aide du bouchon 2
- Fermer les attaches sur les poignets du patient à l'aide des auto-agrippants de pré positionnement, bien superposer le tissu (passage d'un doigt) en serrant lors de l'enroulement de la sangle et non à l'aide du système de fermeture 3
- Passer la sangle dans la boucle en effectuant un aller-retour, verrouiller à l'aide du bouchon sur la tige pré-positionnée dans l'œillet prévu à cet effet 4

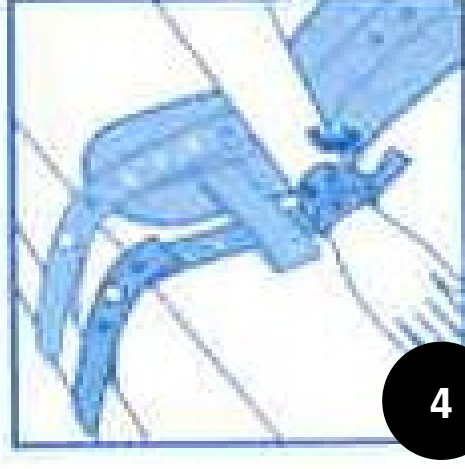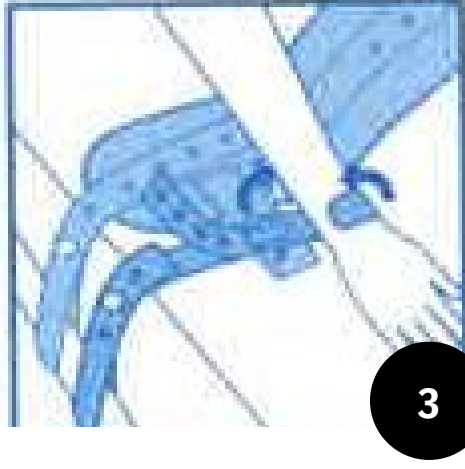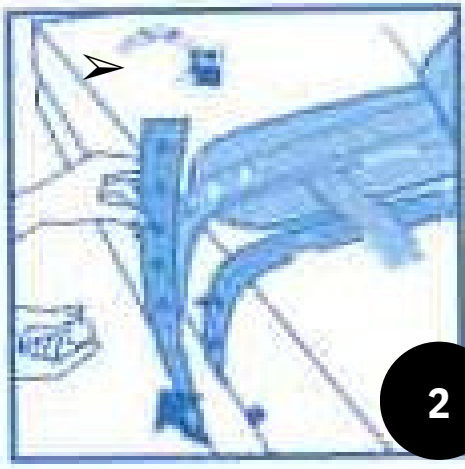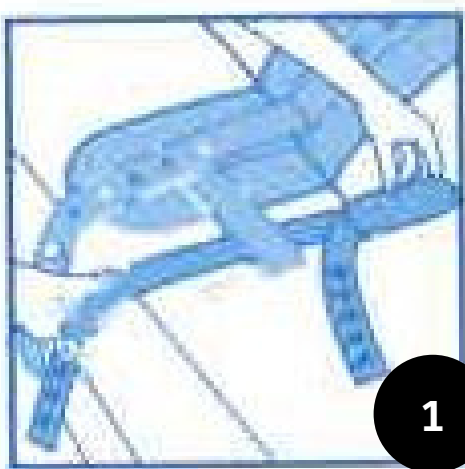

Présentation Vidéo :

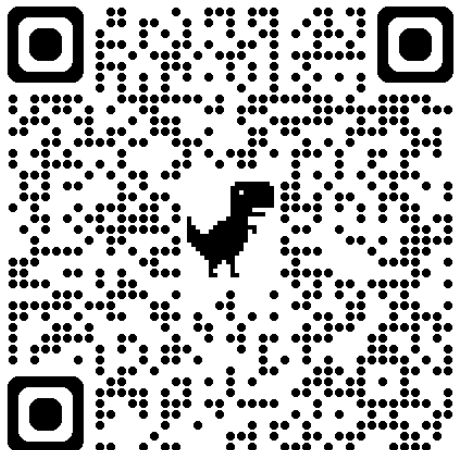

Attache-poignets








Utilisation Taille M/L:

* Peut être utilisé associé à tous supports (lit ou brancard), **ce modèle comprend un œillet supplémentaire** qui permet de réduire au maximum la liberté de mouvement du patient. Permet de réaliser un **serrage stricte**, uniquement possible avec la taille M/L



- Pré-équiper, en utilisant si besoin les passants de la ceinture de sécurité si elle est utilisée, en positionnant les bras le long du corps **1**
- Mettre une tige dans l'œillet de la sangle de l'attache qui vient se fixer au support (toujours dans une partie fixe et rigide du cadre du lit) et fermer avec un bouchon **2**
- Mettre une tige dans la partie molletonnée du poignet. Fermer sur le membre à l'aide du velcro de pré-positionnement en veillant à laisser le passage d'un doigt tout en superposant bien les couches de tissu. **3**
- Passer la petite sangle dans la boucle et faire un aller retour pour venir verrouiller sur la tige, précédemment positionnée, avec un bouchon. **4** **5**

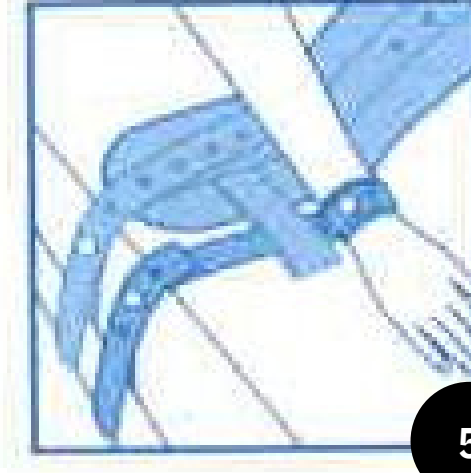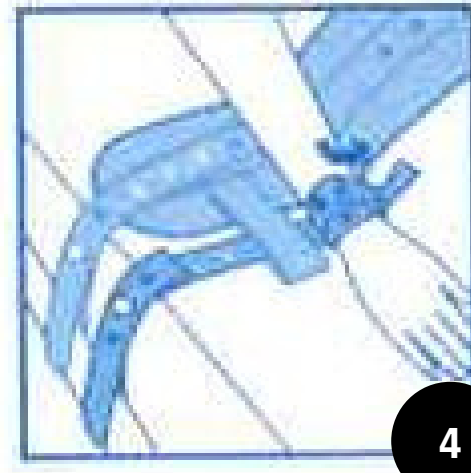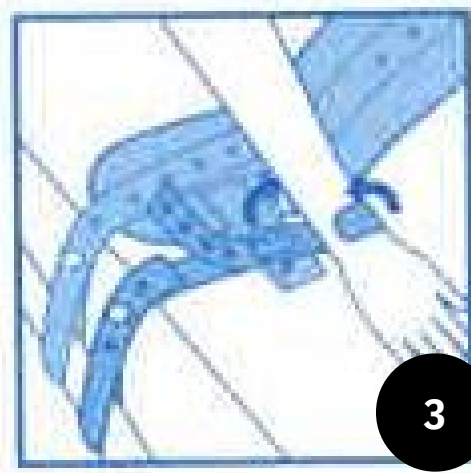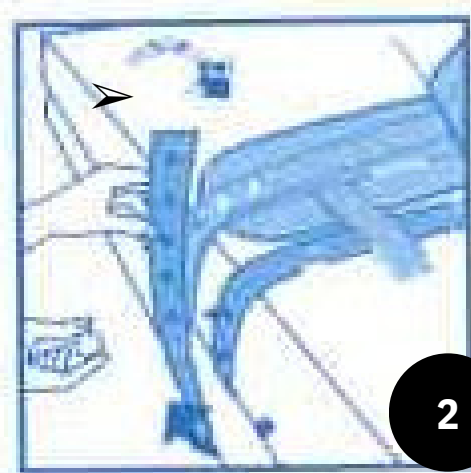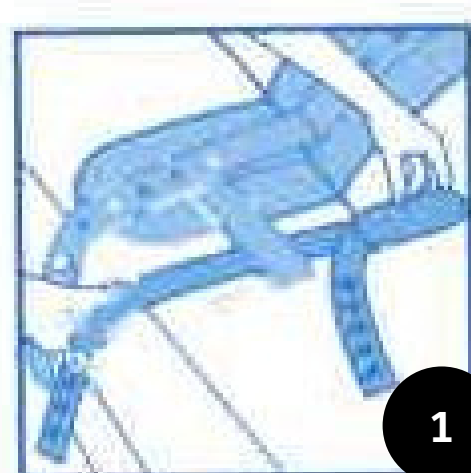

Attache-Chevilles

Système de Mobilité Contrôlé



- Utilisées pour fixer les chevilles au cadre du lit
- La sangle de fixation permet de prééquiper les différents supports
- Plusieurs degrés de fixation permettent de choisir la liberté de mouvement du patient
- Repères alphanumériques permettant de mémoriser l'emplacement des fermetures pour chaque patient et ainsi faciliter la mise en place à chaque application
- Système en 3 éléments dissociés (2 chevilles et 1 sangle au lit)
- Serrer au niveau de la partie la plus fine de la cheville à même la peau


Périnéale	Taille	Tour de Cheville
3351	S	13- 18cm
3350	M	18- 24 cm
3352	L	24- 28 cm
3353	XL	28- 34 cm

Composition :


- 2 attache-chevilles
- 1 sangle d'attache au lit
- 4 fermetures
- 1 clé

Utilisation du SMC :

- Fixer le kit de chaque côté, sur les parties rigides du lit, en ayant au préalable passé les tiges dans les œillets prévus à cet effet. Fermer à l'aide des bouchons **1** **2**
- Fermer sur la partie la plus fine des chevilles à l'aide de l'auto-agrippant de pré-positionnement (éviter les chaussettes), en veillant à laisser le passage d'un doigt **3**
- Passer la sangle dans la boucle en effectuant un aller-retour, verrouiller à l'aide du bouchon **4**
- Venir raccorder l'attache cheville en passant dans la boucle en fer de la sangle, la verrouiller sur la tige de la sangle de prépositionnement **5** **6**

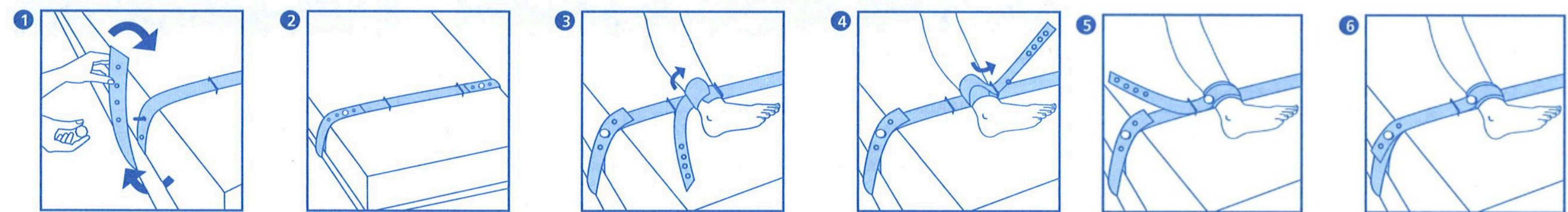

Présentation Vidéo :

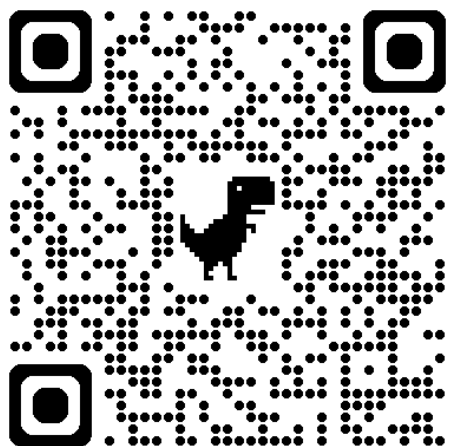

Attache-Chevilles

Attache-chevilles monobloc



- Utilisées pour fixer les chevilles au cadre du lit
- La sangle de fixation permet de prééquiper les différents supports
- Les attache-chevilles monobloc sont cousues sur la sangle de fixation au lit, elles permettent un positionnement rapide avec les jambes toujours dans l'axe du corps




Périnéale	Taille	Tour de Cheville
3321	S	13-18cm
3320	M	18-24cm
3360	M/L	18-28cm
3322	L	24-38cm


Utilisation monobloc :

Composition :

- 2 attache-chevilles cousues à la sangle
- 4 fermetures
- 1 clé

- Fixer le kit de chaque côté, sur les parties rigides du lit, en ayant au préalable passé les tiges dans les œillets prévus à cet effet. Fermer à l'aide des bouchons **1**
- Fermer sur la partie la plus fine des chevilles à l'aide de l'auto-agrippant de pré-positionnement (éviter les chaussettes), en veillant à laisser le passage d'un doigt **3**
- Passer la sangle dans la boucle en effectuant un aller-retour, verrouiller à l'aide du bouchon **4**
- Si besoin et afin de donner plus de liberté de mouvement au patient, re-régler sur le côté en restant dans le périmètre de sécurité du lit

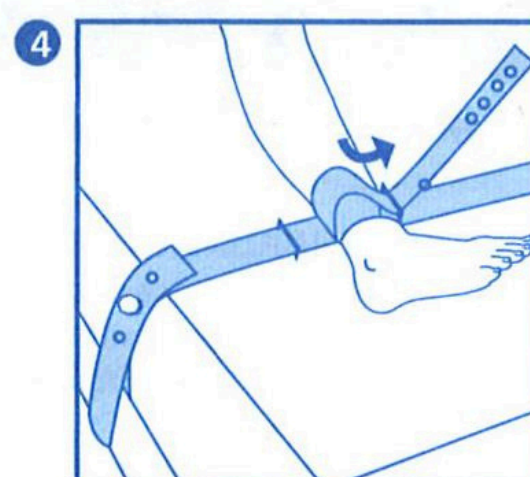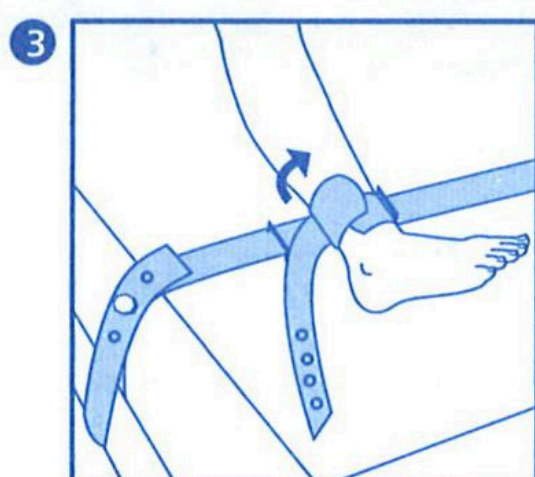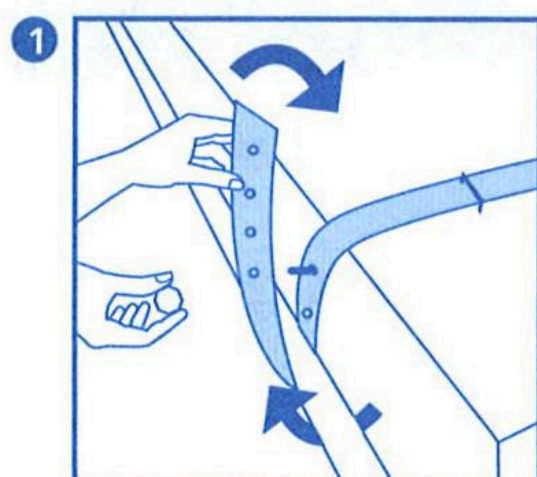

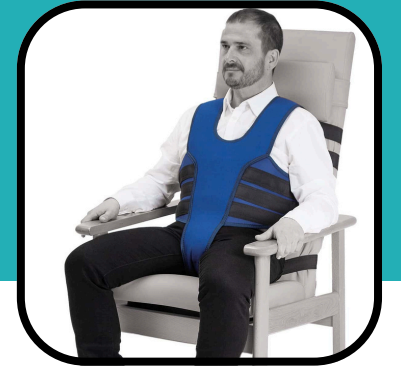

Contentions au fauteuil

- Contention différente selon le patient est en **fauteuil à dossier haut** (type hospitalier) ou **fauteuil à dossier bas** (Fauteuil roulant).
- **Sangle périnéale** obligatoire empêchant le patient de glisser et de venir compresser sa cage thoracique.



Contentions dossier haut



Plastron au fauteuil

Plastron magnétique	Plastron clip	Taille	Tour de taille
4264	4214	S	60 - 90 cm
4265	4215	M	70 - 195 cm
4266	4216	L	70 - 240 cm



Plastron magnétique



Plastron clip

- Pour dossier plus haut que les épaules
- Indiqué pour les patients présentant une déficience du haut du corps ; il maintient le torse et les épaules afin que le patient reste bien droit et évite qu'il se penche vers l'avant
- Identification facile grâce aux logos de taille et de support cousus sur le produit
- Existe en version Clip ou version magnétique

Accessoires commandables :




- Clips de rechange en 40mm (mâle et femelle)
- Compatible avec tous les produits SALVACLIP
- Sachet de 10 paires indivisibles



Code
10HR

Utilisation plastron à clip:

- Enfiler le plastron par la tête, côté nid d'abeille vers le patient, positionner la partie postérieure entre le dos du patient et le dossier du fauteuil
- Fixer au dos du fauteuil à l'aide des clips des 3 sangles, bien ajuster
- Passer la sangle périnéale sous les fesses du patient, entre ses jambes, passer les 2 sangles de chaque côtés du fauteuil afin de les clipser dans le dos de celui-ci, bien ajuster

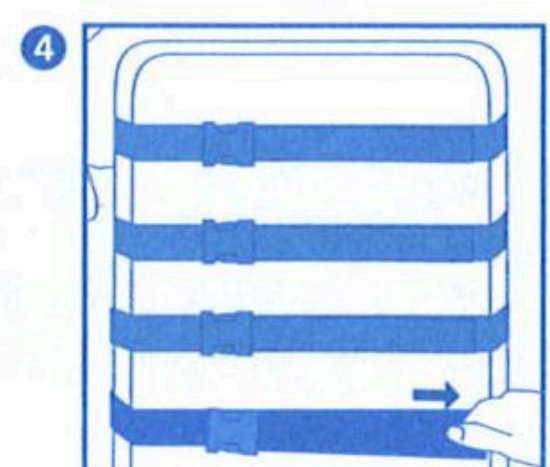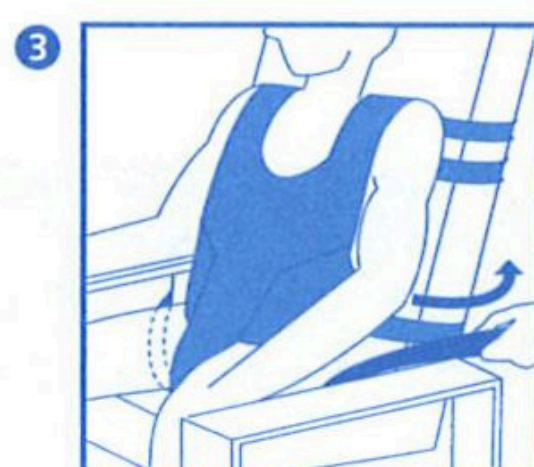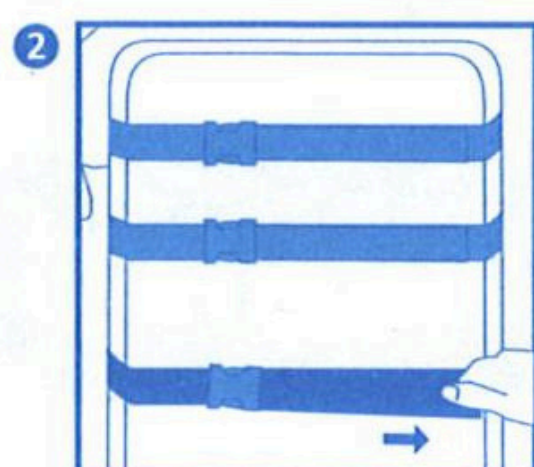




Contentions dossier haut




Plastron au fauteuil

Utilisation plastron magnétique:

- Enfiler le plastron par la tête, côté nid d'abeille vers le patient, positionner la partie postérieure entre le dos du patient et le dossier du fauteuil **1**
- Fixer au dos du fauteuil en passant la sangle de droite dans une ou les deux boucles en acier de celle de gauche, faire un retour et verrouiller à l'aide d'une tige et d'un bouchon en passant dans les œillets des 2 sangles superposées ; à faire pour les 3 sangles **2**
- Veiller à laisser un œillet d'écart avec la boucle. Bien ajuster
- Passer la sangle périnéale sous les fesses du patient entre ses jambes, passer les 2 sangles de chaque côté du fauteuil **3**
- Passer la sangle périnéale sous les fesses du patient, entre ses jambes, passer les 2 sangles de chaque côtés du fauteuil afin les fixer au dos du fauteuil en respectant le même protocole que pour la partie abdominale **4**

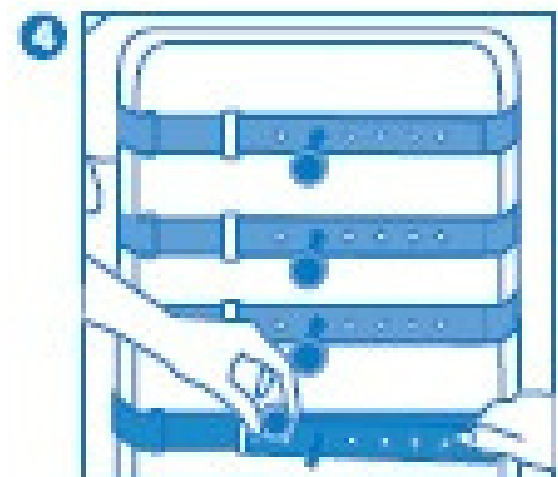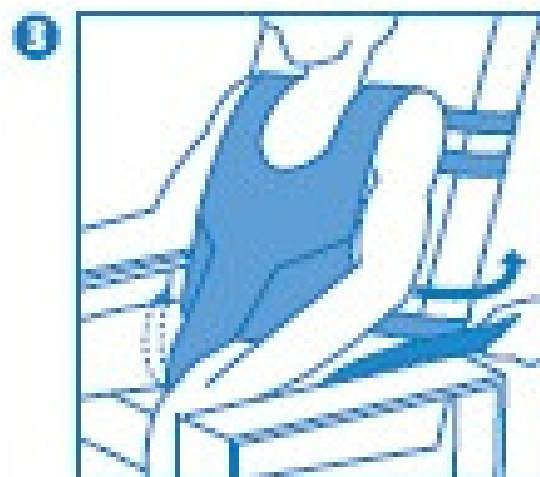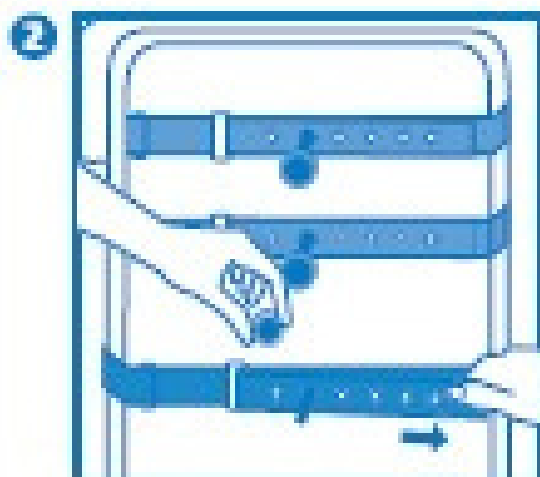

Présentation Vidéo :

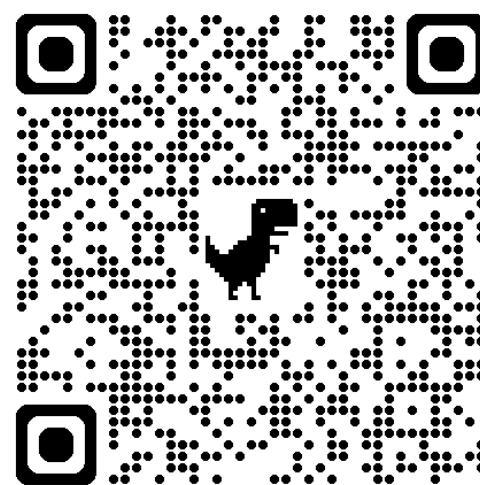

Contentions dossier haut



Ceinture au fauteuil

Ceinture magnétique	Ceinture clip	Taille	Tour de taille
4465	4415	M	65 - 240 cm
4466	4416	L	85 - 295 cm



- Pour dossier plus haut que les épaules
- Indiqué pour les patients qui glissent vers l'avant du fauteuil
- Identification facile grâce aux logos de taille et de support cousus sur le produit
- Existe en version Clip ou version magnétique

Accessoires commandables :

- Clips de rechange en 40mm (mâle et femelle)
- Compatible avec tous les produits SALVACLIP
- Sachet de 10 paires indivisibles



Code
10HR







Ceinture magnétique



Ceinture clip

Utilisation ceinture magnétique:

- Positionner la ceinture sur l'abdomen du patient, coté nid d'abeille vers le patient
- Fixer au dos du fauteuil en passant la sangle de droite dans une ou les deux boucles en acier de celle de gauche, faire un retour et verrouiller à l'aide d'une tige et d'un bouchon en passant dans les œillets des 2 sangles superposées
- Veiller à laisser un œillet d'écart avec la boucle. Bien ajuster
- Passer la sangle périnéale sous les fesses du patient, entre ses jambes, passer les 2 sangles de chaque côtés du fauteuil afin les fixer au dos du fauteuil en respectant le même protocole que pour la partie abdominale

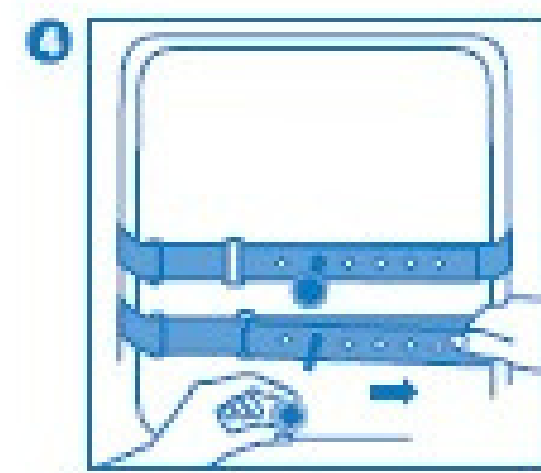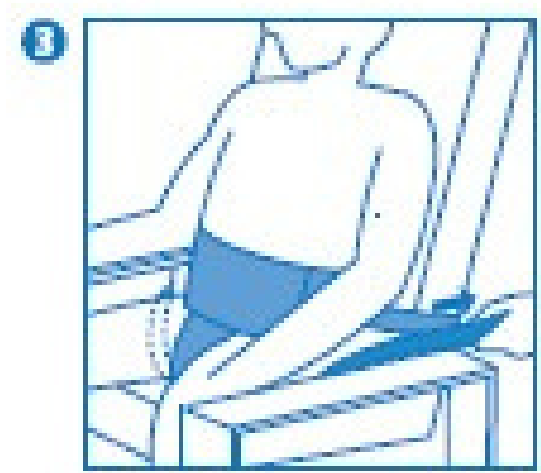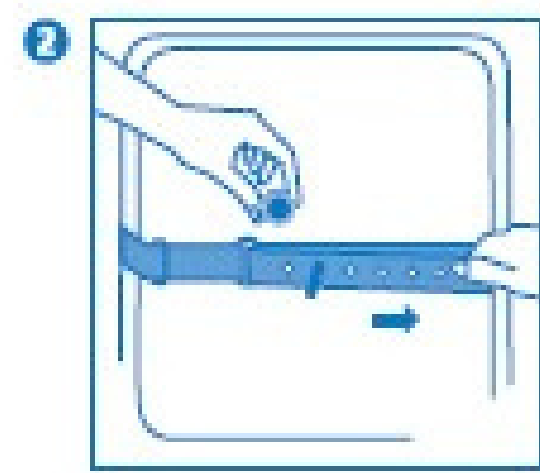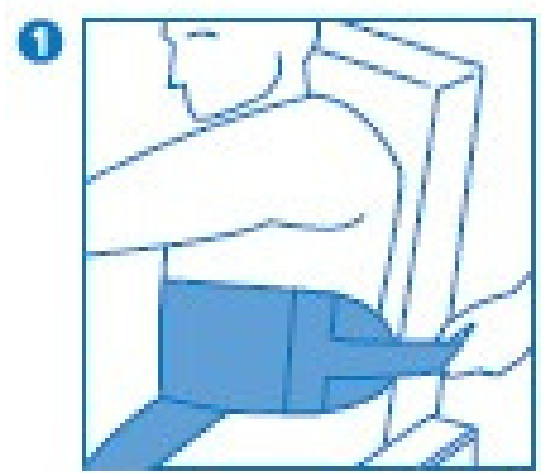





Contentions dossier haut



Ceinture au fauteuil

Utilisation ceinture à clip :

- Positionner la ceinture sur l'abdomen du patient, côté nid d'abeille vers le patient **1**
- Fixer au dos du fauteuil avec le clip de la sangle, bien ajuster **2**
- Passer la sangle périnéale sous les fesses du patient, entre ses jambes, passer les 2 sangles de chaque côtés du fauteuil afin de les clipser dans le dos de celui-ci, bien ajuster **3** **4**

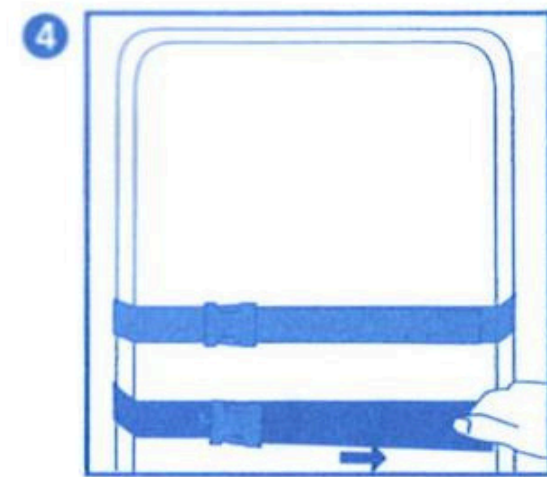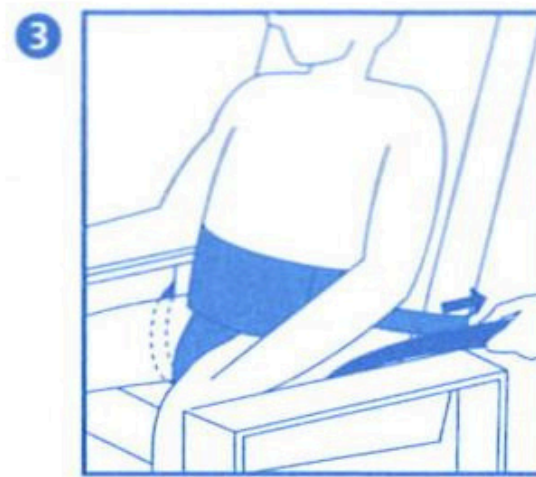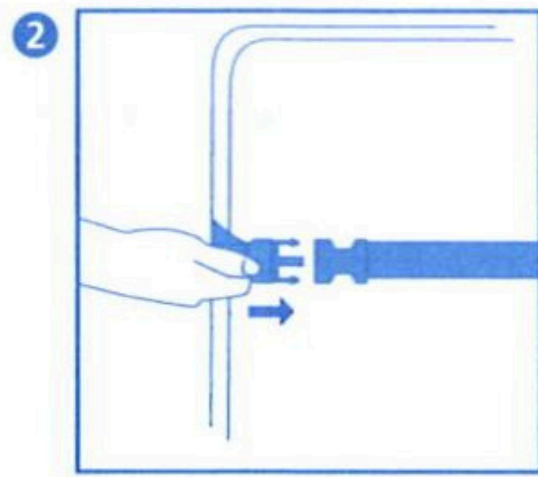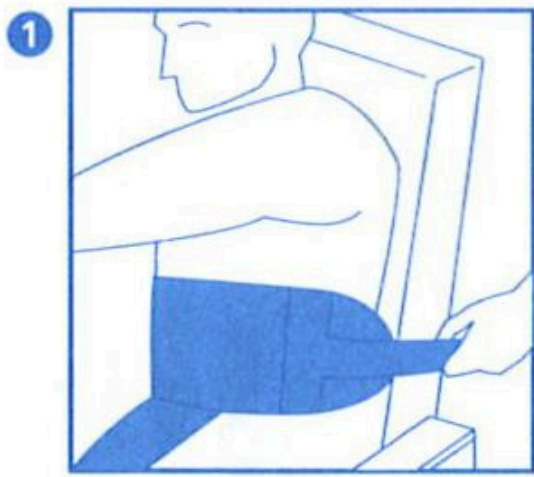

Contentions dossier bas



Plastron au fauteuil roulant

Plastron magnétique	Plastron clip	Taille	Tour de taille
4164	4114	S	90 - 115 cm
4165	4115	M	100 - 135 cm
4166	4116	L	115 - 165 cm



Plastron magnétique



Plastron clip

- Pour dossier plus bas que les épaules
- Indiqué pour les patients présentant une déficience du haut du corps ; il maintient le torse et les épaules afin que le patient reste bien droit et évite qu'il se penche vers l'avant
- Identification facile grâce aux logos de taille et de support cousus sur le produit
- Existe en version Clip ou version magnétique

Accessoires commandables :

- Clips de rechange en 40mm (mâle et femelle)
- Compatible avec tous les produits SALVACLIP
- Sachet de 10 paires indivisibles




Code
10HR

Utilisation plastron à clip et magnétique:

- Placer le plastron par-dessus la tête du patient et le dossier du fauteuil
- Apporter les sangles vers l'arrière du fauteuil et fermer à l'aide des clips / de la fermeture magnétique
- La sangle périnéale passe systématiquement sous les fesses du patient et entre l'assise et le dossier du fauteuil
- S'assurer que les sangles soient fermement et confortablement attachées sans gêner la respiration du patient

Présentation Vidéo :

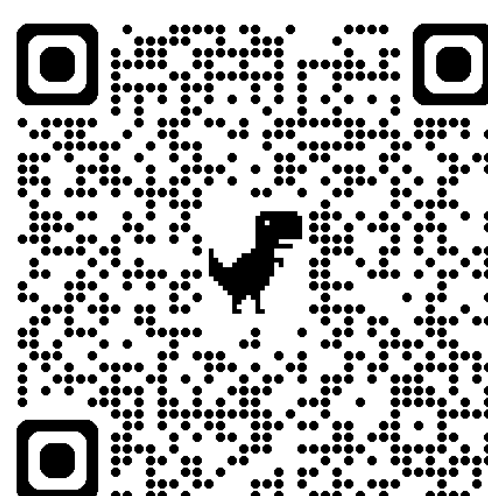

Contentions dossier bas



Ceinture au fauteuil roulant

Ceinture magnétique	Ceinture clip	Taille	Tour de taille
4164	4315	M	100 - 135 cm
4165	4316	L	115 - 165 cm



Ceinture magnétique



Ceinture clip

- Pour dossier plus bas que les épaules
- Permet de maintenir le patient dans son fauteuil, l'évitant de glisser vers l'avant, de tomber et les mauvaises postures
- Identification facile grâce aux logos de taille et de support cousus sur le produit
- Existe en version Clip ou version magnétique

Accessoires commandables :

- Clips de rechange en 40mm (mâle et femelle)
- Compatible avec tous les produits SALVACLIP
- Sachet de 10 paires indivisibles




Code
10HR

Utilisation ceinture à clip et magnétique:

- Placer la ceinture autour de la taille du patient
- Apporter les sangles vers l'arrière du fauteuil et fermer à l'aide des clips / fermeture magnétique
- La sangle périnéale passe systématiquement sous les fesses du patient et se clipse au dos du fauteuil par un geste simple (sans avoir à passer les sangles entre l'assise et le dossier du fauteuil pour la fermeture à clip)
- S'assurer que les sangles soient fermement et confortablement attachées sans gêner la respiration du patient


Présentation Vidéo :

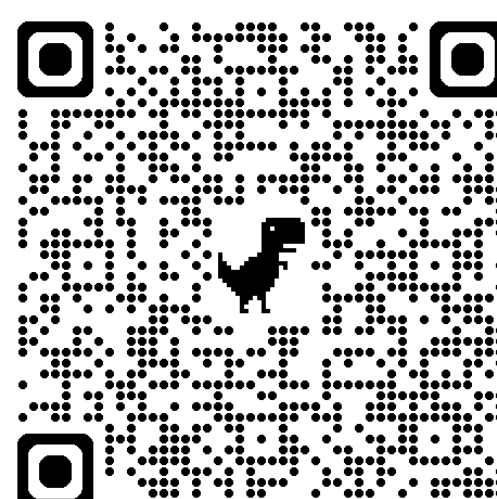



Autres matériels

PYJAMA DE FIXATION AU LIT

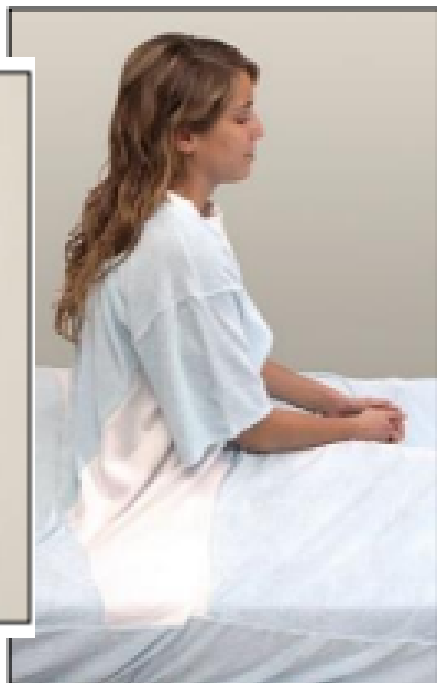

Indications :

- Pour les patients désorientés ou avec des bouleversements neurologiques


Caractéristiques :

- Pour les **patients incontinents** qui essayent d'accéder aux langes de manière persistante et/ou inconsciente
- Le patient ne peut ni se déshabiller ni manipuler ses langes
- Pourvu d'une fermeture éclair renforcée qui ferme du cou aux pieds, et de 4 points d'ajustement pour les lits de 80 à 110 cm de large
- Pyjama intégré dans un drap housse
- Petites ouvertures latérales, fermant par velcro, permettant l'utilisation de perfusion ou d'urinal

Important :

- **N'est pas un système d'immobilisation, ne pas utiliser sur des patients agités, ni agressifs**

PYJAMA

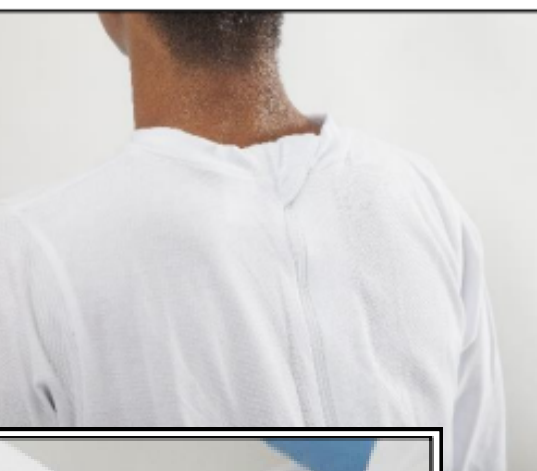

Indications :

- Conçu pour les patients incontinents ou désorientés
- Evite au patient de toucher à ses langes ou de se blesser
- Permet aux soignants de **changer les langes** sans ôter le pyjama
- Manipulation facile pour le personnel soignant mais impossible pour le patient

Caractéristiques :

- Fabriqué en 1 seule pièce
- 2 modèles d'ouvertures/fermetures en fonction des besoins (jambes, dos ou jambes)
- 1 modèle jambes et bras courts
- 1 modèle jambes et bras longs



Autres matériels

MITAINES DE PROTECTION



Caractéristiques :

- Existe en modèle plat ou en modèle rembourré

Caractéristiques du modèle plat :

- Evitent aux patients d'enlever ou de toucher à ses soins, facilite le travail des infirmières
- Peuvent être utilisées sans être fixées au cadre du lit afin de limiter l'utilisation de la contention
- Le côté intérieur est matelassé, avec une plaque rigide amovible. Le côté supérieur est en filet aéré

Caractéristiques du modèle rembourré :

- Elles sont rembourrées de fibres creuses siliconées respirantes qui apportent un toucher doux et confortable, favorisant une posture ergonomique de la main

MOUFLE DE PROTECTION



Indications :

- Protège le patient et le personnel soignant de gestes non souhaités, incontrôlés

- **Ne convient pas aux patients agités**

Caractéristiques :

- Evitent aux patients d'enlever ou de toucher à ses soins, d'attraper divers objets, de s'automutiler
- Taille unique
- Fermeture par auto-agrippant



Autres matériels

PROTECTION BARRIERE DE LIT



Indications :

- Evite au patient de se blesser en se cognant à la barrière du lit
- Empêche le patient de glisser un de ses membres entre les barreaux

Caractéristiques :

- Facile et rapide à mettre en place grâce aux 4 sangles auto-agrippantes qui s'adaptent à toutes les barrières
- Existe en 2 tailles courte 140 x 34 cm et longue 190 x 34 cm
- Déhoussable et lavable
- 3 cm d'épaisseur