



Protocole utilisation Matelas NAUSIFLOW 512

CPR : permet un dégonflage total en $\pm$ en **15 secondes**

Cellules : 17 cellules indépendantes et déconnectables d'une hauteur de **13 cm** en Nylon/PU

Connecteur rapide à fermeture automatique sur les 4 dernières cellules pour permettre une **décharge talonnière**

Alimentation en air : Connecteur 3 voies muni d'un **bouchon de transport**

Sangle de fixation : 2 sangles de fixation permettent de solidariser le matelas au sommier ou de le maintenir enroulé

Housse intégrale : entièrement zippée, conçue en polyuréthane imperméable aux liquides, traitée aux ions d'argent (Ag+). **Lavable à 95°C**

Gaine passe-câble : protège le **câble d'alimentation** des dégradations

Base de mousse : **5 cm** de mousse haute densité pour un maintien des cellules

Protocole utilisation Compresseur 100 Auto Quattro

Quatre modes thérapeutiques : pour répondre aux recommandations individuelles des patients.

- **Dynamique** : cycle d'alternance des pression toutes les 12 minutes afin d'éviter la compression vasculaire prolongée.
- **Stimulation** : déclenche une vasodilatation réflexe favorisant le bourgeonnement (uniquement en phase de cicatrisation).
- **Progressif** : mode dynamique à cycle aléatoire pour éviter une accoutumance au support. (lors du sevrage du matelas)
- **Statique** : stabilité du support recommandé en cas de traumatisme divers et douleur liée.

Trois Alarmes :

- **Alarme visuelle et sonore basse pression** : en cas de fuite et/ou mauvais raccordement.
- **Alarme visuelle Maintenance** : indique que la pompe nécessite une maintenance.
- **Alarme visuelle* et sonore* défaut interne** : indique tous problèmes internes (logiciel ou autre) (*autre qu'alarme basse pression).

Maintien automatique de la pression : Système maintenant et ajustant automatiquement la pression pour conserver un niveau constant et adapté aux besoins du patient.

Capture Forme libre


Réglage digital : Interface numérique précis pour une meilleure visibilité des paramètres choisis.

Quatre réglages de confort : Options de confort personnalisables pour répondre aux préférences individuelles des patients.

Verrouillage/Déverrouillage : Verrouillage automatique du panneau de commande.

Mode soins : plan ferme temporisé à 30 minutes pour faciliter les soins, le repositionnement et les transferts du ou vers le lit.

Pompe silencieuse : Fonctionnement à faible bruit (**<28 dB**) pour un confort optimal.

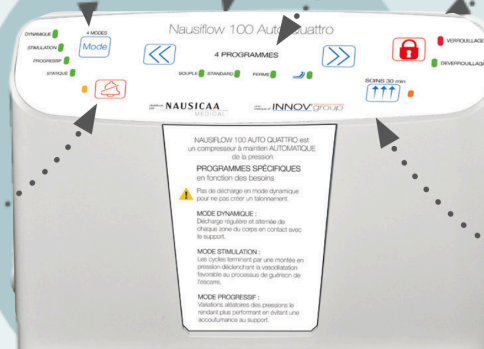




Protocole utilisation Matelas Quattro

Informations :

- Pour des adultes d'une taille **≥ à 150 cm** avec un poids entre **30 kg et 150 kg** avec une durée d'alitement **≥ à 15 heures** par jour présentent une ou plusieurs escarres ou sont considérées comme personnes à risque. Indiqué pour une escarre constituée de **stade 1 à 2**.
- **Ne pas couvrir l'unité de contrôle** avec les couvertures (risque de surchauffe du système et de dysfonctionnement)
- Pour un confort optimal les **3 cellules situées en zone de tête** sont **statiques** et pour faciliter les décharges en zone talonnière, ses **4 dernières cellules** sont pourvues d'un **connecteur rapide à fermeture automatique**

Description du compresseur :

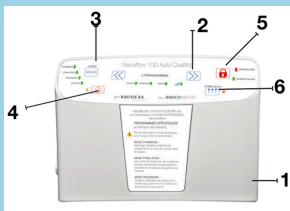

- **Interrupteur marche/arrêt (1)** : Met en route ou arrête le fonctionnement du compresseur.
- **Réglage de pression de confort (2)** : Quatre réglages pour optimiser le confort du patient dont 1 position assise
- **Réglage des différents modes (3)** : Quatre modes disponibles : Dynamique / Stimulation / Progressif / Statique
- **Alarme (4)** : Met en veille l'alarme sonore. Réinitialise les alarmes.
- **Verrouillage/Déverrouillage du panneau de commande (5)** : Verrouille/déverrouille manuellement le panneau de commande
- **Mode Soins (6)** : Active/désactive ce mode.

Réglage pression du matelas :

STATIQUE	SOUPLE	STANDARD	FERME	ASSIS
BPC ¹ min. 30kg	De 40 à 60 kg	De 50 à 100 kg	De 90 kg à 150 kg	De 30° à 90° et 200 ² kg max.



Une fois le patient couché sur le matelas, selon son ressenti, son état de confort ainsi que son positionnement, vous pouvez adapter cette pression à l'aide des boutons << et >>

Le compresseur surveille les changements de pression et les adapte automatiquement. Dès qu'elle est atteinte, le compresseur se met en veille jusqu'au prochain changement de cycle.

Réanimation cardio pulmonaire:




Dégonfler le matelas avant d'effectuer la réanimation

Dégonflage de la cellule d'air en **20 secondes**

→ en cas d'extrême urgence (arrêt cardiaque). Celle-ci est située en zone de tête sur la face latérale gauche* (*vue depuis le pied de lit).

Contrôle Manuel :

en mode Alternating :

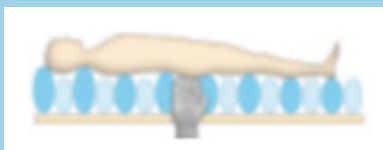

- Vous devez être en mesure de pouvoir ressentir une légère pression tout en ayant la possibilité d'effectuer un mouvement de va et vient. La plage acceptable entre les deux est d'environ 25 à 40 mm
 - Incapacité d'effectuer le mouvement de va et vient → **augmenter la pression.**
 - Si vous effectuez ce mouvement sans aucune résistance → **diminuer la pression.**

Position Assise :




- Il est impératif de sélectionner ce pictogramme avant modification de positionnement du patient. **Patienter 1 à 2 minutes** puis placer le patient en position semi-assise ou assise c'est-à-dire suivant un angle compris entre **30° et 90°**.
 - **DANGER EN ZONE SACREE** : position comprise entre **30° et 60°**
 - **DANGER EN ZONE ISCHIATIQUE** : position comprise entre **60° et 90°**



Protocole Installation/Désinstallation Matelas Nausiflow 512

Installation :

- **Enlever du lit le matelas** existant (air et/ou mousse classe 2) et positionner le matelas à air directement sur le sommier.
- **Dérouler le matelas** sur le sommier en veillant que le connecteur d'alimentation en air se retrouve au **pied de lit**.
- Vérifier le bon fonctionnement de toutes les parties mobiles du lit.
- Vérifier que la **valve CPR** du matelas est bien hermétiquement **fermée**.
- Si disponible, placer le **câble électrique** du compresseur dans **la gaine passe-câble** prévue à cet effet afin qu'il ne puisse pas être écrasé, coincé ou arraché.
- **Insérer le connecteur des tuyaux** d'alimentation en air du matelas dans celui du compresseur.
- **Laisser le matelas se gonfler** entièrement avant d'installer le patient et de régler la pression du matelas selon le patient.
- Recouvrir la housse du matelas d'un drap aussi fin que possible.

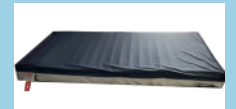

- Assurez-vous que les deux connecteurs (matelas et compresseur) soient correctement reliés et sécurisés.



- Border le drap trop serré réduit l'efficacité du matelas.




- Le temps de gonflement est d'environ **30 minutes** l'utilisation de la pompe à gonflage rapide Nausicaa vous permet de gonfler en ± 2 minutes.

Désinstallation :

- **Eteindre** le compresseur.
- **Retirer** la fiche du câble d'alimentation électrique de la **prise murale**.
- **Retirer de la gaine passe-câble** le câble d'alimentation électrique.
- **Déconnecter le matelas** du compresseur.
- **Ouvrir la valve CPR** et laisser le matelas se dégonfler.
- Une fois le matelas dégonflé, dégager les sangles de fixation, placer le compresseur au centre du matelas puis enrouler le matelas avec précaution.

La pompe proposée par Nausicaa Médical vous permet également de dégonfler le matelas en ± 2 minutes.

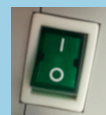



Protocole Nettoyage/Désinfection Matelas Nausiflow 512

Procédure Journalière :

Entretien de la housse :

Si possible, enlever le patient du matelas puis procéder comme suit :

Vérifier l'intégrité de la housse.

- Nettoyer les traces de selles et de sang en premier.
- Imprégner une lingette ou un chiffon propre à usage unique d'une **solution nettoyante** et frotter toute la surface en insistant plus spécifiquement sur la partie sur laquelle repose le patient, ainsi que répéter cette opération sur tous ses éléments externes (base grise, compresseur, connecteur d'air et lanière CPR)
- **Enlever l'excédent** de la solution nettoyante à l'aide d'un chiffon propre à usage unique légèrement humide.
- **Essuyer avec un chiffon** sec propre et à usage unique.

Désinfection de la housse :

- Pulvériser une **solution désinfectante** sur toute la surface de la housse ainsi que sur les éléments externes (base grise, compresseur, connecteur d'air et lanière CPR) et laisser agir selon les recommandations d'utilisation préconisées par le fabricant.
- Après le temps de rémanence, si nécessaire **essuyer l'excédent** avec un chiffon sec propre et à usage unique.
- Veiller qu'il ne subsiste pas d'humidité résiduelle ou de condensation et que la housse soit parfaitement sèche avant de réinstaller le patient sur le matelas.

Si vous êtes dans l'incapacité d'enlever le patient du matelas procéder comme suit :

- Vérifier autant que possible l'intégrité de la housse.
- Latéraliser le patient en veillant à le sécuriser à l'aide des barrières de lit et si besoin, l'empêcher de se remettre sur le dos à l'aide d'un dispositif (coussin de positionnement ou autre).
- Nettoyer les traces de selles et de sang en premier.
- Imprégner une lingette ou un chiffon propre à usage unique d'une solution nettoyante/ désinfectante. Frotter la surface accessible en insistant plus spécifiquement sur la partie sur laquelle repose le patient et laisser agir selon les recommandations d'utilisation préconisées par le fabricant de cette solution.
- Veiller à ce que le patient et plus particulièrement la peau de celui-ci, n'entre pas en contact avec la solution nettoyante/désinfectante et ce durant toute l'opération.
- Essuyer l'excédent avec un chiffon sec propre et à usage unique.
- Renouveler tout le processus repris ci-dessus pour l'autre côté.
- Veiller qu'il ne subsiste pas d'humidité résiduelle ou de condensation et que la housse soit parfaitement sèche avant de réinstaller complètement le patient sur le matelas.