


TÉLÉCOMMANDE


Relève-buste




Hauteur variable du sommier

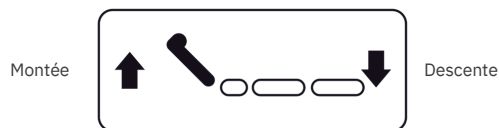

Relève-jambes

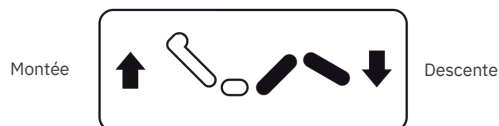

Relève-buste et relève-jambes
fonctionnement simultané

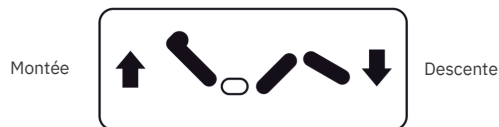

Installateur

N° de dépannage : **Valentin +33 7 72 10 10 61 / +33 6 85 45 71 88**

Tampon de l'installateur

EuroMed
Vente et location de matériel médical
117 rue de Maubeuge 59620 Aulnoye-Aymeries
Tél. 03 27 64 34 99
www.euromed-materiel-medical.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le lit ne doit pas être manipulé par des enfants ou par des personnes confuses ou désorientées.
- Le lit doit être branché sur une prise dédiée, conforme aux normes en vigueur. Dans le cas où l'utilisation d'un adaptateur, d'une rallonge ou d'une prise multiple s'avère indispensable, il est nécessaire de s'assurer que ses caractéristiques sont adaptées à celle du dispositif.
- Les consignes de nettoyage et de désinfection préconisées par le fabricant doivent être respectées.
- La fiche d'alimentation secteur doit être débranchée avant tout déplacement du lit. Pendant le déplacement, le câble ne doit pas être en contact avec le sol et les roulettes. Ne pas tirer sur le câble secteur pour débrancher la fiche de prise de courant.
- Lors de toute manipulation, veiller à ne pas pincer les cordons électriques des moteurs et de la télécommande ainsi que de ne pas faire de nœuds.
- L'état des câbles doit être vérifié régulièrement, si la moindre altération est constatée et pour toute intervention technique, contacter la personne en charge de l'entretien du lit.
- Au moins 2 des freins qui équipent les roues doivent être bloqués lorsque le lit n'a pas besoin d'être déplacé.
- S'assurer du **débloquage des freins** lors du déplacement du lit.
- Un mauvais positionnement de la barrière peut être préjudiciable à la sécurité ou provoquer un dysfonctionnement.
- Après chaque utilisation et pendant le repos de la personne alitée, il est préférable de mettre le lit en position basse afin de réduire la gravité d'une chute éventuelle.
- Ne pas s'asseoir sur le côté du relèvement buste ou du relèvement jambes si ce dernier n'est pas à plat.
- Une maintenance préventive systématique doit être réalisée au minimum une fois par an suivant les recommandations du fabricant.



EuroMed
Votre matériel médical en toute confiance

RECOMMANDATION D'UTILISATION D'UN LIT MÉDICAL ÉLECTRIQUE INSTALLÉ AU DOMICILE

Personnes présentes

- ☐ Patient :
- ☐ Aidants : 1
2
- ☐ Professionnel de santé :

Visa

Lit médical

- ☐ Lit pour enfant (taille < ou = 145 cm)
- ☐ Lit pour adulte (taille > 146 cm)

Dénomination commerciale du lit :

Numéro de série :

Date d'installation : / /

- ☐ Contrôle du bon fonctionnement
- ☐ Formation des utilisateurs à l'utilisation du lit
- ☐ Information sur les consignes de sécurité à respecter

Potence installée : ☐ Oui ☐ Non SN :

Barrières installées : ☐ Oui ☐ Non SN :

Nom de l'installateur :


Sources :

Fiche d'utilisation du lit suivant les recommandations du fabricant et les recommandations de l'ANSM du 22 juillet 2002
NF EN 60601-2-52
NF EN 50637


Les barrières de lit doivent être fournies si **la prescription le précise**

BARRIÈRES 3/4 MÉTAL


Pour baisser la barrière

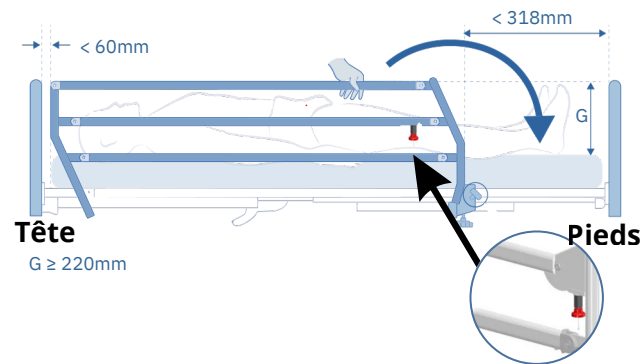

Pour monter la barrière

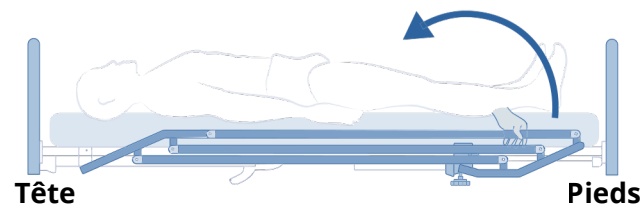

Barrière 3/4 et son obturateur d'espace pour constituer une pleine longueur

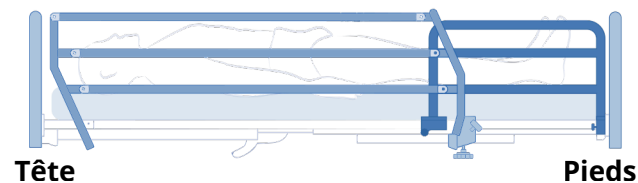

Réaliser une évaluation des risques représentés par l'ensemble «Lit-accessoires-matelas» en regard des besoins de la personne soignée et des soignants.


LA POTENCE

Q La potence est une aide au patient en position allongée pour se remonter ou se redresser seul dans le lit.

Q Elle n'est pas prévue pour l'aide au transfert.



SYSTÈME D'AIDE À LA MOBILITÉ

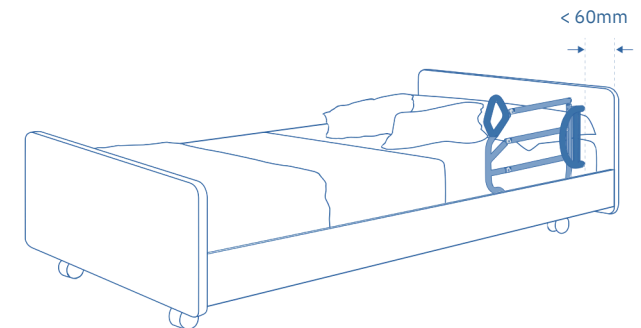

FREINS

➤ Les roues doivent être bloquées pour éviter les risques de chute en cas d'appui sur le lit.

➤ S'assurer du non blocage des roues avant d'essayer de déplacer le lit.

