




Protocole en cas de Coupure d'électricité Matelas Nausiflow 512



**Compresseur NAUSIFLOW
100 AUTO QUATTRO**

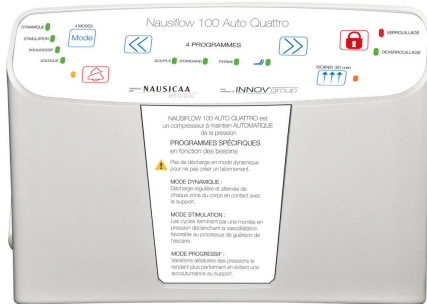

**Compresseur
NAUSIFLOW 2S**

Procédure temporaire maximum 6h

Pendant la coupure de courant :

- **Déconnecter le surmatelas à air** du compresseur en effectuant simultanément une pression de chaque côté du connecteur se trouvant à gauche du compresseur.
- **Connecter le bouchon de transport** au surmatelas à air.
- **Vérifier que le bouchon ferme hermétiquement** les tuyaux du surmatelas à air

1



2



3



Après la coupure de courant :

- **Eteindre le compresseur** en appuyant sur l'interrupteur à droite du compresseur
- **Allumer le compresseur** en appuyant sur l'interrupteur à droite du compresseur
- **Attendre que le compresseur envoie de l'air**
- **Déconnecter le surmatelas à air** du bouchon de transport en effectuant simultanément une pression de chaque côté du connecteur
- **Connecter le surmatelas à air** au compresseur
- **Vérifier que le matelas gonfle normalement** (gonfle totalement en 30min)

1



2



3



4

