



PROTOCOLE DE RECHARGE POUR SOULÈVE PERSONNE / VERTICALISATEUR



Lifty Fox 200kg



Homelift Fox 175kg



Vertic Fox 200kg

RÉCURRENCE DU PROTOCOLE

EN COLLECTIVITÉ : 1 À 3 FOIS PAR SEMAINE SELON UTILISATION

À DOMICILE : 1 FOIS PAR SEMAINE

LORS DU STOCKAGE : 1 FOIS PAR MOIS

1 charge
=
environ
30 cycles

VÉRIFICATION AVANT PROTOCOLE :



VÉRIFIER QUE LE BOUTON
D'ARRÊT D'URGENCE N'EST PAS
ENCLENCHÉ



VÉRIFIER LE BRANCHEMENT DES
CABLES SOUS LE BOITIER
ELECTRIQUE DE L'APPAREIL

PROTOCOLE :




1 BRANCHER L'ALIMENTATION DE
L'APPAREIL



2 LE VOYANT ON (VERT) S'ALLUME



3 ATTENDRE QUE LE VOYANT ORANGE
S'ALLUME (PEUT PRENDRE 5MIN)
(UNIQUEMENT SI LA BATTERIE
N'EST PAS DÉJÀ CHARGÉE)

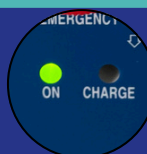

4 ATTENDRE QUE LE VOYANT
ORANGE S'ÉTEIGNE



5 DÉBRANCHER L'APPAREIL À LA
PRISE SECTEUR (NE PAS
DÉBRANCHER SOUS LE BOITIER
ELECTRIQUE)



6 RANGER LE CORDON
D'ALIMENTATION SUR L'APPAREIL


INFORMATIONS :



L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS S'IL
EST BRANCHÉ SUR LE SECTEUR



L'APPAREIL NE FONCTIONNE PAS ET/OU
NE CHARGE PAS SI LE BOUTON ROUGE
EST ENFONCÉ

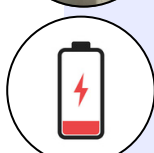

EN CAS DE BATTERIE FAIBLE L'APPAREIL
EMET UN "BIP" LORS DE L'UTILISATION. S'IL
SURVIENT LORS DU CYCLE, TERMINEZ LE
CYCLE ET METTEZ L'APPAREIL EN CHARGE



EN CAS DE PANNE, UNE BAGUE DE
DESCENTE D'URGENCE PERMET DE FINIR
LE TRANSFERT EN SÉCURITÉ EN LA
TOURNANT DANS LE SENS HORAIRE