



Protocole utilisation Matelas NAUSIFLOW 512

CPR : permet un dégonflage total en ± en **15 secondes**

Cellules : 17 cellules indépendantes et déconnectables d'une hauteur de **13 cm** en Nylon/PU

Connecteur rapide à fermeture automatique sur les 4 dernières cellules pour permettre une **décharge talonnière**

Alimentation en air : Connecteur 3 voies muni d'un **bouchon de transport**

Sangle de fixation : 2 sangles de fixation permettent de solidariser le matelas au sommier ou de le maintenir enroulé

Housse intégrale : entièrement zippée, conçue en polyuréthane imperméable aux liquides, traitée aux ions d'argent (Ag⁺). **Lavable à 95°C**

Gaine passe-câble : protège le **câble d'alimentation** des dégradations

Base de mousse : **5 cm** de mousse haute densité pour un maintien des cellules

Protocole utilisation Compresseur NAUSIFLOW 2S

Réglage mécanique : permet le réglage de la pression selon le **confort ressenti** par le patient

Maintien mécanique de la pression : son principe mécanique à débit constant maintient la pression au niveau déterminé et adapté au confort du patient

Durée de cycle fixe : programmée en cycle de **12 minutes**

Deux modes thérapeutiques : pour répondre aux besoins individuels des patients :

- **Dynamique** : mode par défaut de l'alternance des pressions
- **Statique** (soins palliatifs) : stabilité du support recommandé en cas de traumatismes divers et douleur liée, pour favoriser le repos ainsi qu'une fin de vie déclarée.

Alarme basse pression : Alarme **SONORE** et **VISUELLE** se déclenche si la pression est basse en permanence et/ou n'arrive pas à la pression souhaitée et/ou à se maintenir.

- Pour un confort auditif il est possible de désactiver l'alarme sonore en appuyant sur le bouton, la LED continuera à clignoter. Appuyez à nouveau dessus pour l'activer quand le problème est solutionné

Pompe silencieuse : Fonctionnement à faible bruit (**<28 dB**) pour un confort optimal.





Protocole utilisation Matelas Nausiflow 2S

Informations :

- Pour des adultes d'une taille **≥ à 150 cm** avec un poids entre **30 kg et 130 kg** avec une durée d'alitement **≥ à 15 heures** par jour présentent une ou plusieurs escarres ou sont considérées comme personnes à risque. Indiqué pour une escarre constituée de **stade 1 à 2**.
- **Ne pas couvrir l'unité de contrôle** avec les couvertures (risque de surchauffe du système et de dysfonctionnement)
- Pour un confort optimal les **3 cellules situées en zone de tête** sont **statiques** et pour faciliter les décharges en zone talonnière, ses **4 dernières cellules** sont pourvues d'un **connecteur rapide à fermeture automatique**

Description du compresseur :



- **Interrupteur marche/arrêt (1) :** Met en route ou arrête le fonctionnement du compresseur.
- **Réglage de pression de confort (2) :** Optimise le confort du patient.
- **Mode Statique ou Dynamique (3) :** Active/désactive le mode choisi.
- **Alarme (4) :** Met en veille l'alarme sonore. Réinitialise les alarmes.
- **Pression normale ou faible (5) :** Permet de visualiser la pression en l'état.

Réglage pression du matelas :



Une fois le patient couché sur le support, selon son ressenti, son état de confort ainsi que son positionnement vous pouvez adapter la pression en tournant le bouton de réglage (2) dans le sens horaire

Réanimation cardio pulmonaire :




Dégonfler le matelas avant d'effectuer la réanimation

Dégonflage de la cellule d'air en **20 secondes**

→ en cas d'extrême urgence (arrêt cardiaque). Celle-ci est située en zone de tête sur la face latérale gauche* (*vue depuis le pied de lit).

Contrôle Manuel :

en mode Alternating :

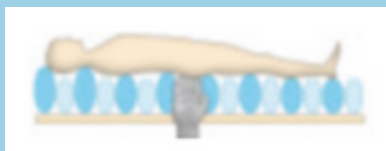

• Vous devez être en mesure de pouvoir ressentir une légère pression tout en ayant la possibilité d'effectuer un mouvement de va et vient. La plage acceptable entre les deux est d'environ 25 à 40 mm

- Incapacité d'effectuer le mouvement de va et vient → **augmenter la pression.**
- Si vous effectuez ce mouvement sans aucune résistance → **diminuer la pression.**

Position Assise :



- Il est impératif de sélectionner ce pictogramme avant modification de positionnement du patient. **Patienter 1 à 2 minutes** puis placer le patient en position semi-assise ou assise c'est-à-dire suivant un angle compris entre **30° et 90°**.





Protocole Installation/Désinstallation Matelas Nausiflow 2S

Installation :

- **Enlever du lit le matelas** existant (air et/ou mousse classe 2) et positionner le matelas à air directement sur le sommier.
- **Dérouler le matelas** sur le sommier en veillant que le connecteur d'alimentation en air se retrouve au **pied de lit**.
- Vérifier le bon fonctionnement de toutes les parties mobiles du lit.
- Vérifier que la **valve CPR** du matelas est bien hermétiquement **fermée**.
- Si disponible, placer le **câble électrique** du compresseur dans **la gaine passe-câble** prévue à cet effet afin qu'il ne puisse pas être écrasé, coincé ou arraché.
- **Insérer le connecteur des tuyaux** d'alimentation en air du matelas dans celui du compresseur.
- **Laisser le matelas se gonfler** entièrement avant d'installer le patient et de régler la pression du matelas selon le patient.
- Recouvrir la housse du matelas d'un drap aussi fin que possible.



- Assurez-vous que les deux connecteurs (matelas et compresseur) soient correctement reliés et sécurisés.



- Border le drap trop serré réduit l'efficacité du matelas.



- Le temps de gonflement est d'environ **30 minutes** l'utilisation de la pompe à gonflage rapide Nausicaa vous permet de gonfler en ± 2 minutes.

Désinstallation :

- **Eteindre** le compresseur.
- **Retirer** la fiche du câble d'alimentation électrique de la **prise murale**.
- **Retirer de la gaine passe-câble** le câble d'alimentation électrique.
- **Déconnecter le matelas** du compresseur.
- **Ouvrir la valve CPR** et laisser le matelas se dégonfler.
- Une fois le matelas dégonflé, dégager les sangles de fixation, placer le compresseur au centre du matelas puis enrouler le matelas avec précaution.

La pompe proposée par Nausicaa Médical vous permet également de dégonfler le matelas en ± 2 minutes.





Protocole Nettoyage/Désinfection Matelas Nausiflow 2S

Procédure Journalière :

Entretien de la housse :

Si possible, enlever le patient du matelas puis procéder comme suit :

Vérifier l'intégrité de la housse.

- Nettoyer les traces de selles et de sang en premier.
- Imprégner une lingette ou un chiffon propre à usage unique d'une **solution nettoyante** et frotter toute la surface en insistant plus spécifiquement sur la partie sur laquelle repose le patient, ainsi que répéter cette opération sur tous ses éléments externes (base grise, compresseur, connecteur d'air et lanière CPR)
- **Enlever l'excédent** de la solution nettoyante à l'aide d'un chiffon propre à usage unique légèrement humide.
- **Essuyer avec un chiffon** sec propre et à usage unique.

Désinfection de la housse :

- Pulvériser une **solution désinfectante** sur toute la surface de la housse ainsi que sur les éléments externes (base grise, compresseur, connecteur d'air et lanière CPR) et laisser agir selon les recommandations d'utilisation préconisées par le fabricant.
- Après le temps de rémanence, si nécessaire **essuyer l'excédent** avec un chiffon sec propre et à usage unique.
- Veiller qu'il ne subsiste pas d'humidité résiduelle ou de condensation et que la housse soit parfaitement sèche avant de réinstaller le patient sur le matelas.

Si vous êtes dans l'incapacité d'enlever le patient du matelas procéder comme suit :

- Vérifier autant que possible l'intégrité de la housse.
- Latéraliser le patient en veillant à le sécuriser à l'aide des barrières de lit et si besoin, l'empêcher de se remettre sur le dos à l'aide d'un dispositif (coussin de positionnement ou autre).
- Nettoyer les traces de selles et de sang en premier.
- Imprégner une lingette ou un chiffon propre à usage unique d'une solution nettoyante/ désinfectante. Frotter la surface accessible en insistant plus spécifiquement sur la partie sur laquelle repose le patient et laisser agir selon les recommandations d'utilisation préconisées par le fabricant de cette solution.
- Veiller à ce que le patient et plus particulièrement la peau de celui-ci, n'entre pas en contact avec la solution nettoyante/désinfectante et ce durant toute l'opération.
- Essuyer l'excédent avec un chiffon sec propre et à usage unique.
- Renouveler tout le processus repris ci-dessus pour l'autre côté.
- Veiller qu'il ne subsiste pas d'humidité résiduelle ou de condensation et que la housse soit parfaitement sèche avant de réinstaller complètement le patient sur le matelas.